

韓國ENSKIN獨家研發 新一代微針印DERMA STAMP

在美容院或在自己家裡就可以進行
目前韓國最流行的
Dermatological Care System 印章
護理系統



I.P.S. TRADING LIMITED (CHINA)

HEALTH SHINE TRADING LIMITED (HongKong)

中華地區獨家代理

1. 新一代微针印DERMA STAMP是什麼？

- 由韩国ENSKIN公司研发及销售；為醫療等級之專業美容產品
- 通過美國FDA药品管理（药品号：878.4800），及韓國KFDA認證
- 针头为医药SUS304（不锈钢）制成，刺激性非常小；
- 韓國國家級研究院背書，並取得優良產品GMP認證

21世纪划时代产品DERMA STAMP

DERMA STAMP是一款拥有140根微针及有崭新的图章状设计的医学装置，能在超短的时间内，打通皮肤通道，帮助皮肤更好吸收美容产品。从而达到美白、紧致、提升、祛除痘疤、肥胖纹/妊娠纹、淡化色斑、皱纹、改善皮肤质感、调匀肤色及增加皮肤弹性，回复肌肤年轻青春之效果。

每一个DERMA STAMP均以无菌真空包装，安装可靠，是韩国整形街医生一致使用的皮肤治疗仪，新一代微针印，创造微针孔比传统滚轮微针密度高40%，加速皮肤治疗效果，非一般市面微针可媲美。

2. 新一代微针印 (DERMA STAMP) 图片



3. FDA認證

[Quick Links: Skip to main page content](#) [Skip to Search](#) [Skip to Topics Menu](#)
[Skip to Section Content Menu](#) [Skip to Common Links](#)

Establishment Registration & Device Listing



[510 \(k\)](#) | [Registration & Listing](#) | [Adverse Events](#) | [Recalls](#) | [PMA](#) | [Classification](#) | [Standards](#)
[CFR Title 21](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [X-Ray Assembler](#) | [Medsun Reports](#) | [CLIA](#)

[New Search](#)

[Back To Search Results](#)

Proprietary Name:	Derma Stamp
Classification Name:	INSTRUMENT, SURGICAL, DISPOSABLE
Product Code:	KDC
Device Class:	1
Regulation Number:	878.4800
Medical Specialty:	General & Plastic Surgery
Registered Establishment Name:	ENSKIN
Registered Establishment Number:	3007735397
Owner/Operator:	Enskin
Owner/Operator Number:	10028657
Establishment Operations:	Manufacturer

4. 新一代微针印DERMA STAMP与传统微针的区别对比


1. 按压式的装置，比传统的微针滚轮使用更安全，过程中减少疼痛及流血；
2. 避免以往滚轮式设计微针的坏处，免除俗称猫爪的副作用；
3. 全新的设计能更准确对症下药及可自调深浅力度；
4. 可使用眼部（上眼皮亦可使用），运用更广泛；
5. 传统微针滚轮可增加营养品30%的吸收渗透能力，新一代微针可增加200%吸收能力，能更准确有效的导入营养品，每个部位只需要按压一次即可达到效果；
6. 不需要微针滚轮的“米”字型以及重要操作模式；大大缩短了做的过程中的疼痛感以及时间
7. 能更有效地将营养性物质送达真皮层，促进胶原蛋白以及弹力蛋白的再生，从而达到一系列的美容效果，特别适用于治疗严重疤痕、小面积的伤痕、暗瘡造的凹凸洞等。

5. DERMA STAMP与微针滚轮的对比图

垂直入出方式と傾斜屈曲入出(ローラー式)方式の比較


STAMP

수직입출방식 (더마스탬프)

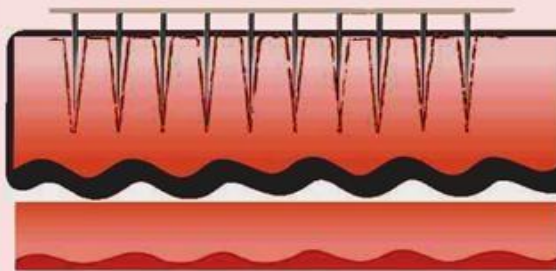

ROLLER

경사굴곡입출방식 (기존롤러제품)

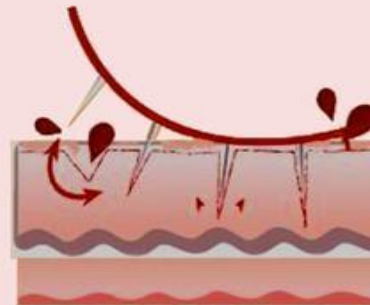

- 많은 조직손상으로 통증이 크고 피가 많이 남
- 활동성 여드름에 사용불가
- 굴곡이 많은 부위나 좁은 부위 시술 어려움
- 심한 화상 흉터 시술 시 니들이 잘 안 들어가고 쉽게 꺾임

6. DERMA STAMP的种类

DERMA STAMP的种类区分

针的深度	0.24mm	0.8mm	2.1mm
区域	全脸使用	全脸使用	脸颊、疤痕、身体
间隔时间	每天使用	一周一次	一个月一次
麻醉	无需麻醉	局部麻醉	局部麻醉或利多卡因注射
适用范围	日常保养、美白补水	细小皱纹、痤疮、疤痕，粉刺	深层疤痕、烧伤疤痕、妊娠纹

7. 使用DERMA STAMP前后对比

严重痤疮治疗前



严重痤疮治疗后



7. 使用DERMA STAMP前后对比

痘痘治疗前



痘痘治疗后



7. 使用DERMA STAMP前后对比

眼部皱纹治疗前



眼部皱纹治疗后



7. 使用DERMA STAMP前后对比

F/51 환자 - 케로이드(肩, 2.1mm)
케로이드除去のため、形成外科で手術後、部位が広がった病歴(+)
2009.2.18 - 2009.4.1 SKIN STAMP 総 5回
(ケロイドの好転)

Ⓐ

SKIN STAMP (2.1mm) 治療 (治療期間-5週) 週1回 治療



施術 前

疤痕治疗前



施術 5週 後

疤痕治疗后

8. DERMA STAMP疗程设计

- 美白补水；
- 美白去斑疗程；
- 柔敏修复疗程；
- 净肤祛痘疗程；
- 驻颜抗衰老疗程；
- 修复凹凸洞；
- 痘疤痘印修复；
- 修复妊娠纹；
- 生发疗程；

9. DERMA STAMP操作步骤

面部护理操作步骤：

- 卸妆
- 洁肤
- 祛角质
- 润肤
- 75%酒精完全浸泡DERMA STAMP10-15分钟后，待干。（第一次使用无需消毒）
- 消毒操作部位
- 涂抹麻醉软膏，麻药起效后操作（通常20-30分钟起效）
- 戴上手套
- 用注射器吸出功能性营养液均匀涂抹在欲操作之部位。
- 在操作部位按顺序按压。不断的改变操作位置，直到涂抹的功能性营养液被吸收为止（整个面部操作过程限制在5分钟以内），做完一遍，再着重问题部位重复一遍即可。
- 镇定肌肤
- 100%骨胶原面膜
- 爽肤、润肤
- 操作手法：从额头开始展开操作，印压式按顺序不放过每一寸面部肌肤，微针根据自身皮肤状况可半压或全压下去（整个面部操作过程限制在5分钟以内）残留的功能性营养液可用戴上手套的手指均匀的涂抹在肌肤上。

10. 操作注意事项

1. 给客人操作之前先建议客人操作局部小范围，以测试客户是否过敏。
2. 提示：操作人员给客人操作时无菌观念一定要到位，手套必须使用一次性产品
3. 操作按顺序按压肌肤及重要肌肤问题可重复一到二遍
4. 美容院必备辅助用品：酒精，麻药，生理盐水（温开水或纯净水代替）
5. 75%酒精完全浸泡DERMA STAMP10-15分钟
6. 患有免疫性疾病,皮肤正在过敏,及疤痕性体质者都不能操作：高血压、冠心病、糖尿病、严重皮肤病、心脏病、妊娠期、甲状腺疾病的客人、正在进行荷尔蒙治疗、血液疾病患者禁止使用，月经期、哺乳期谨慎操作。
7. 被操作者必须是正常皮肤，，曾经使用过换肤、皮肤剥脱性治疗的人群谨慎操作。
8. DERMA STAMP在眼球、上眼皮等部位均可操作，注意力度；在操作眼角、额头、颈部、嘴角、颧骨等皮肤较薄及血管分布区域需谨慎操作
9. 精华液打开后放在冰箱冷藏效果最佳
10. 每个部位使用产品不宜超过三种,建议所有治疗性肌肤从0.8mm开始操作,敏感性肌肤及干性偏薄肌肤前几次都必需用0.8mm操作.操作时要力度不宜过重,避免重复操作.

11. DERMA STMAP使用后注意事项

1. 操作完毕后，6小时内不要用生水洗脸.最好可保持24小时.
2. 治疗后请加强补水保湿，每周敷膜二次以上。
3. 每次洁面后爽肤、润肤外，需补充足够皮肤所吸收的营养物质，加强纤维组织及基质所需的营养及水分，充分达到抗皱、保持皮肤的弹性及张力；否则皮肤会出现干燥等现象。
4. 操作后三天内尽可能的避免大量流汗现象.
5. 请勿泡温泉及桑拿
6. 皮肤三天内不宜化彩妆
7. 疗程期间一定要注意防晒，防晒指数不宜低于SPF22
8. 注意皮肤的清洁，保持毛孔通畅
9. 操作完MTS后一个星期不要做美容护理。疗程治疗期间严禁做其他功效型护理，及仪器护理
10. 建议家居护理采用纯自然产品，最好配合医疗专用护肤品
11. 为了保持更好的效果尽可能保持正常的睡眠时间和良好的饮食习惯。
12. 减少喝酒量,不吃辛辣食品.多吃含铁的食品
13. 敏感性皮肤在本疗程期间禁用其它产品,特别是激素类软膏
14. 治疗后面部微红及发热是正常情况
15. 如有疑问请致电本公司咨询！